



Biossays C8

ANALIZADOR DE BIOQUÍMICA AUTOMÁTICO



WWW.RAPIDIAGNOSTICS.PE



EXPLORANDO EL NUEVO CAMINO PARA LA GESTIÓN DE LA QUÍMICA CLÍNICA

- » Biossays C8 es un analizador bioquímico automático con un alto rendimiento de hasta 1600 T/H, que proporciona una solución eficiente para laboratorios medianos y grandes.
- » Con tecnologías probadas y alta escalabilidad, Biossays C8 permite la automatización completa y la máxima eficiencia en su laboratorio.

CARACTERÍSTICAS

- » Módulo único: 1600 T/H.
- » Cuatro módulos combinados: 6400 T/H.
- » 300 posiciones de muestra.
- » Hasta 144 posiciones de reactivos.
- » Capaz de integrarse con el módulo descapador y MAGLUMI X8.

BENEFICIOS

Detección de alta velocidad

- » Hasta 6400 T/H con cuatro módulos combinados.




Excelente rendimiento

- » Pipeteo preciso.
 - El micromuestreo garantiza la precisión del muestreo de muestras de bajo volumen.




Arandela

- » Distribución automática de agua caliente, líquido ácido y líquido alcalino, garantizando un lavado completo.

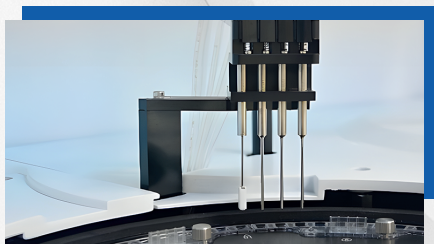

Mezclador

- » Mezclador de lavado independiente para evitar la contaminación por arrastre.
- » La velocidad de mezcla de los diferentes ensayos se puede ajustar de forma independiente.


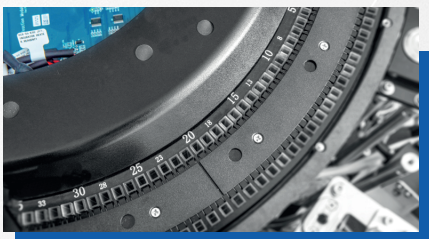


» Módulo de reacción

- 362 cubetas de cuarzo permanentes, sin mantenimiento.
- Calefacción sólida con control de temperatura estable a $37 \pm 0,2$ °C.

» Sistema óptico

- Tecnología de post-división de rejilla holográfica cóncava.
- Control preciso de la temperatura, larga vida útil de la fuente de luz.

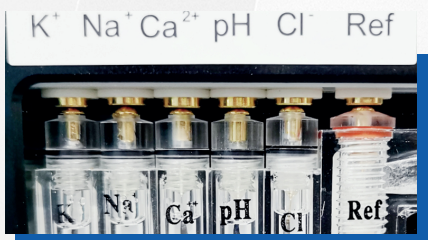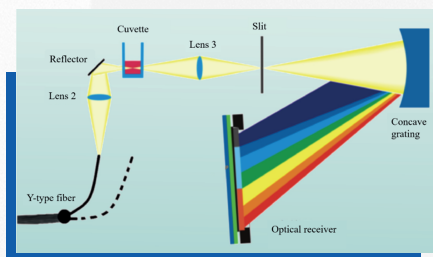

Módulo ISE

- Tipos de electrodos:
- K⁺, Na⁺, Cl⁻, iCa²⁺, pH, electrodo de referencia

DISEÑO INTELIGENTE Y FÁCIL DE USAR


- » Discos de reactivos dobles de carga frontal y sistema de visualización auxiliar para facilitar el reemplazo de reactivos



- » Módulo descapador configurable, no requiere operación manual

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE

- » Capaz de integrar el módulo Decapper y la MAGLUMI X8

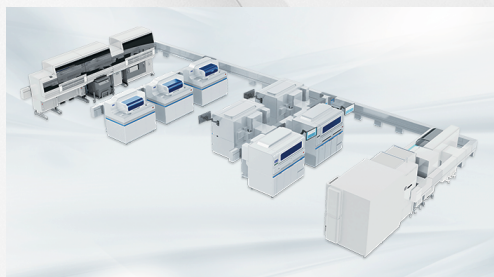

- » Capaz de conectarse con el sistema de automatización de laboratorio (TLA/LAS).



Biossays 240 Plus



RAPIDIAGNOSTICS PERU SAC



RAPIDIAGNOSTICS SAC



RapiDiagnostics

WWW.RAPIDIAGNOSTICS.PE